

■ TOSKANI

■ TKN mesoject gun



Трансдермална
мезотерапия



Електропорация



TKN Mesoject Gun Апарат за Трансдермална мезотерапия и Електропорация

■ Микро- проникване

TKN Mesoject Gun се използва главно за повишаване на трансдермалната абсорбция, стимулира метаболизма чрез въвеждане на хранителни вещества в кожата, повишава хидратацията, намалява бръчките и фините линии, петната и други кожни проблеми.

Принципи

Принцип на технологията

ЕРМ или Електропорация микрочип съчетава трансдермална технология и електропорация. Чрез комбинацията на двата метода се образуват микроканалы в роговия слой, което спомага за навлизането на хранителни вещества в кожата. Резултатът е - стимулиране на микроциркулацията на кръвта, ускоряване метаболизма на клетките, забавяне на стареенето.



Принцип на действие

1. Микрочип трансдермална технология

Това устройство използва технологията на трансдермален микрочип за въвеждане на подхранващи съставки в кожата (като хиалуронова киселина). След като епидермисът абсорбира тези съставки, се стимулира микроциркулацията на капилярите и метаболизмът на клетките като по този начин се предотвратява преждевременното клетъчно стареене.
Дълбочина на проникване: базален слой.

2. Технологията електропорация

Електропорацията е технология, при която електрически импулси (us-ms) създават временни водни канали. Електропорацията се прилага директно върху кожата, за да създаде временни и обратими водни канали за увеличаване на пропускливостта на клетъчните мембрани. Това спомага преминаването на хидрофилните молекули и тяхното директно навлизане в клетката.

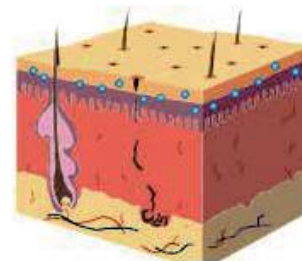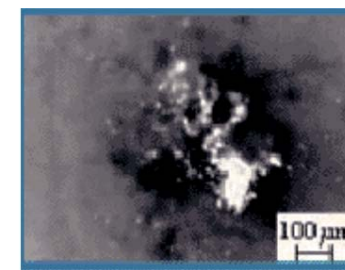

Предимства



Лек и удобен апликатор

Ергономичният дизайн на ръкохватката съответства на естествената форма на човешкото тяло. Дръжката е гъвкава и е проектирана да намали умората на ръката по време на процедурата.




Микрочип

Микрочипът се произвежда по технология на лазерно рязане. Фините микро-канални улесняват проникването на хранителните вещества в епидермалния базален слой. Прилаганите коктейли се съобразяват с нуждите и състоянието на кожата на всеки пациент.

Напълно комфортно, без болка

TKN Mesoject Gun изтласква разтвора за мезотерапията с висока скорост, за да му помогне да достигне до базалния слой, без да повреди епидермалните клетки. TKN Mesoject Gun е иновативно устройство без игли, което осигурява комфортни и безболезнени процедури.

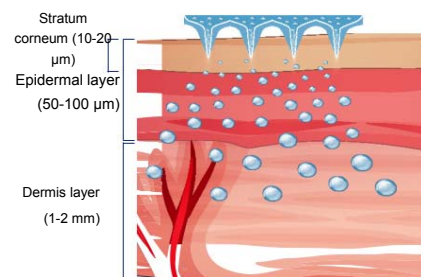

Преди & След

След първата терапия се наблюдава видим лифтинг ефект, а кожата е хидратирана и еластична. След цикъл от 3-4 терапии, проблеми като разширени пори, фини линии и бръчки се изглаждат значително. Дългосрочното третиране трайно намалява появата на бръчки и осигурява по-младежки и сияен тен.

ПРЕДИ




СЛЕД



Терапия с TKN Mesoject Gun, в комбинация с подхранващи коктейли за растеж на косата, укрепва корените на косата, прави ги прави по-силни и устойчиви.

ПРЕДИ

СЛЕД

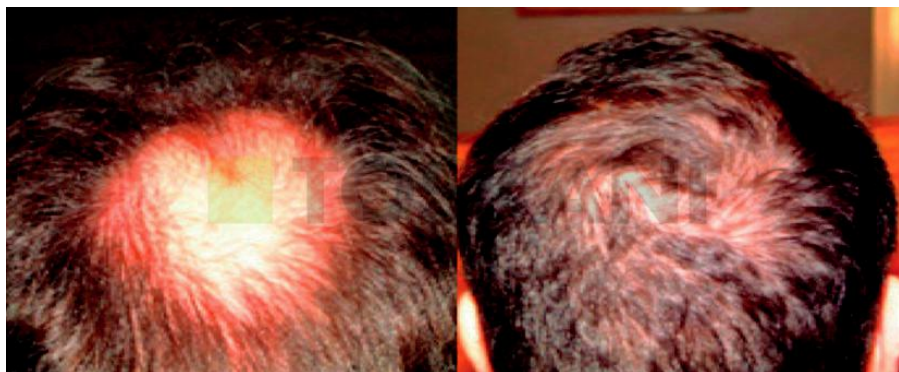

Технически характеристики

Система	
Електропояция	Ниво 1-5
Контактна дълбочина	Ниво 1-5
Дозирание	Ниво 1-5
Честота	1-5 Hz
Предварителна настройка	ДА

Микрочип	
Микроканал	F модел: 25 Н модел: 15
Височина на микроканала	0.5 mm
Диаметър на микроканала	0.1 mm
Диаметър на микроканала	0.05 mm
Третирана зона	F модел: 13mm x 18mm Н модел: 13mm x 12.5mm
Микрочип зона	F модел: 8.2mm x 8.2mm Н модел: 5.5mm x 8.6mm

Платформа	
Размер на апарата (ДхШхВ)	30.2 x 27.2 x 12.6cm
Размер на вътр. пакет (ДхШхВ)	33 x 33 x 20 cm
Размер на опаковката (ДхШхВ)	38 x 38 x 27 cm
N.W.	2.5 Kg
G.W.	4 Kg
Електричество	Входящо: 100-240 VCA, 2A, 50-60 HZ Изходящо: DC 12V 4A