

Antoanette 30
години
Hair & Beauty



eue

Ace of Face

Хидра дермоабразио, Диамантен пилинг
Мускулна стимулация EMS

Обновяване,
уплътняване
и лифтинг
в една процедура!

FACE YOGA



EVE Революционна платформа за естетични терапии

Eve е професионален уред за естетически терапии, комбинация от няколко високоефективни технологии:

- ✓ Усъвършенствано **хидра дермоабразо** с различни накрайници и ексклузивен тоник - **X-Stream**.
- ✓ **Диамантен пилинг** (микродермоабразо).
- ✓ Многобройни **Микротокови функции**, всяка от които е предназначена да регулира/ реактивира специфична био-електрическа активност в кожата за постигане на различни естетически резултати.
- ✓ Четири различни програми за **Електро стимулация на мускулите (EMS)**.

Интелигентно и ефективно многофункционално устройство

Микротокови апликатори



Микротокови накрайници със **Сферична, Т-образна форма и с форма на гребен**, за удобство в различните зони на третиране.




Проводими микро ръкавици за микротокови терапии.

Хидро абразо с прецизен контрол


Настройте струята на **X-Stream** тоника за хидрадермаабразо и вакуумното засмукване според състоянието на кожата и индивидуалните предпочитания на клиента.

Програмирани терапии, но с регулируеми програми

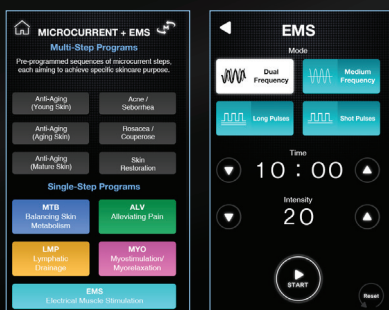

Избор от предварително програмирани терапии, чиито **продължителност и параметри** могат да се регулират в съответствие със състоянието на кожата и индивидуалните предпочитания на клиента.

Апликатори за Хидра/Микродермоабразо

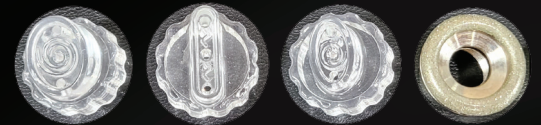

- ✓ Селекция от хидра-дермоабразо накрайници за третиране на различни зони на лицето и скалпа
- ✓ 3 различни диамантени накрайника, с различна плътност и размери, за пилинг на различни типове кожа и зони на лицето.

Ексклузивен Хидра дермоабразо тоник

X-Stream- ефективна формула за **нежно ексфолиране и хидратиране на кожата**.


Тоник / Контейнер за утаяване




- ✓ Лесно поставяне/ отстраняване на бутилката с **X-Stream** тоник.
- ✓ Снабден със сензор, който предотвратява **преливане на бутилката с утайка** като визуализира предупреждение на дисплея.

Микротокова Електротерапия

Микротоковата функция на Eve доставя електрически импулси с ниска интензивност и честота в кожата. Макар и трудно забележими, **тези микротокове имитират собствените биоелектрични процеси на тялото** и по този начин регулират/ възстановяват електрозависимите вътреклетъчни процеси.

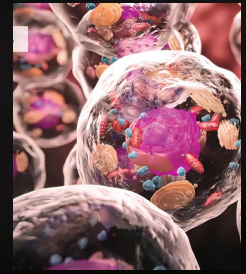

Апаратът е снабден с **4 микротокови функции**, различаващи се по интензитета и честотата на импулсите. **Всяка от тези функции регулира биоелектричната активност на различни целеви клетки и следователно има различно физиологично въздействие върху кожата.**

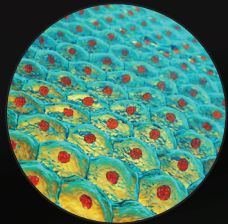


МТВ - Активиране метаболизма на кожата

Функцията МТВ е насочена към структурните клетки на кожата – кератиноцити и фибробласти.

Тази функция възстановява биоелектричния потенциал на клетъчната мембрана и стимулира производството на АТФ, като по този начин възстановява метаболитната активност на кожните клетки и процесите на регенерация на кожата.

МТВ микротоковата терапия **помага за възстановяване на девитализирана, лишена от тонус и увредена кожа** (напр. в резултат на стареене, слънчево изгаряне или възпаление). **Възстановява жизнените функции на кожата и нейния младежки вид.**

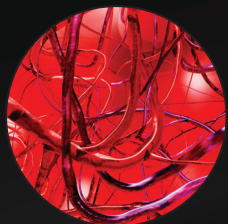

LMP - Стимулира кръвообръщението и лимфния дренаж

Микротоковата функция LMP регулира биоелектрическата активност на гладкомускулните клетки в кръвоносните и лимфните капилари. Възстановява микроциркулацията в тези капилари и в резултат на това:


- ✓ **Стимулира лимфния дренаж** – премахва токсините от кожата и **намалява отока**
- ✓ Подобрява състоянието на кожата при случаи на **розацеа, купероза и други съдови нарушения.**
- ✓ **Възстановява метаболизма на кожата и регенерацията на тъканите.**



ALV - Облекчава болки и дискомфорт на кожата

Функция ALV е насочена към невронните клетки в кожата.

Тя повишава прага на възбудимост на нервните окончания в кожата, което намалява болката и други кожни неразположения, при свръхчувствителност, акне, възпаления и др.

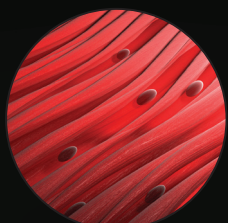

MYO - Мускулна стимулация и релаксация

Микротоковата функция MYO е насочена към тънките мускулни влакна на лицето и шията. Чрез фибрилиране на тези влакна, функция регулира мускулния тонус:

- ✓ **Лифтира отпуснатата кожа.**
- ✓ **Изглажда бръчките.**

Терапевтични програми

Многофункционални микротокови програми

Всяка от тях е предназначена да постига резултати според състоянието на кожата:

- Анти стареене при различни възрастови групи
- Третиране на акне и себорея
- Третиране на розацеа и купероза
- Възстановяване на девитализирана, състарена, или увредена кожа

Всяка програма е автоматична последователност от няколко различни микротокови функции, подредени и синхронизирани, според изискванията на тази програма.

Едностепенни Микротокови програми

Тези програми позволяват на оператора да управлява самостоятелно всяка от функциите на терапиите, фокусирани за постигането на следните резултати:

- **MTB** - Възстановява девитализирана, лишена от тонус и увредена кожа.
- **LMP** - Стимулира микроциркулацията в кожата, намалява отоците, подобрява състоянието на кожата
- **MYO** - Стимулира мускулите на лицето и шията, за постигане на лифтинг ефект, релаксация на лицевите мускули за изглаждане на дълбоките бръчки.
- **ALV** - Облекчава болката и дискомфорта на кожата

MICROCURRENT + EMS

Multi-Step Programs

Pre-programmed sequences of microcurrent steps, each aiming to achieve specific skincare purpose.

Anti-Aging
(Young Skin)

Acne /
Seborrhea

Anti-Aging
(Aging Skin)

Rosacea /
Couperose

Anti-Aging
(Mature Skin)

Skin
Restoration

Single-Step Programs


MTB
Balancing Skin
Metabolism

ALV
Alleviating Pain

LMP
Lymphatic
Drainage

MYO
Myostimulation/
Myorelaxation

Видове микротокови апликатори

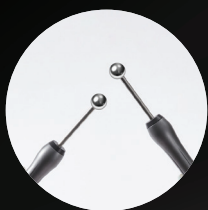

Сферообразен метален накрайник

Подходящ за всички функции и третиране зони.



Метален накрайник – тип гребен

Предназначен за терапии на скалпа – стимулира микроциркулацията, заздравява корените на косата, намалява пърхута и себореята.



T-образен метален накрайник

Полезен при третиране на по-обширни участъци – бузи и шия.



Проводими ръкавици -


За приятна, безопасна и високоэффективна терапия с микротоки.

Електро стимулация на мускулите (EMS)

Функцията (EMS) предлага „тренировка“ за **лицевите мускули в долната половина на лицето**, които са с намален тонус и се нуждаят от стимулация.

Чрез електрически импулси, с ниско напрежение насочени към двигателните точки на тези мускули, EMS сесии стимулират освобождаването на невротрансмитера ацетилхолин (ACh) от нервните окончания. ACh се свързва с рецепторите на мембраната на мускулите и предизвиква мускулна контракция.

Повтарящите се контракции, реактивират мускулната функция и възстановяват мускулния тонус, което има стягащ и лифтинг ефект.

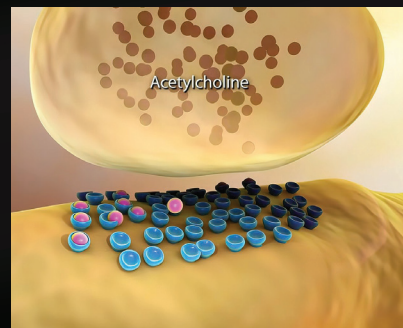


4 различни EMS програми

Четири програми се различават една от друга по честотата и вида на електрическите импулси.

Гъвкавият избор на програма и интензивност позволява на оператора да програмира сесията според индивидуалната чувствителност на клиента, така че:

- ✓ Да се осигури ефективна мускулна контракция.
- ✓ Усещането от мускулната контракция да е в рамките на търпимост на клиента за период от 5-10 мин., колкото са необходими за сесията.

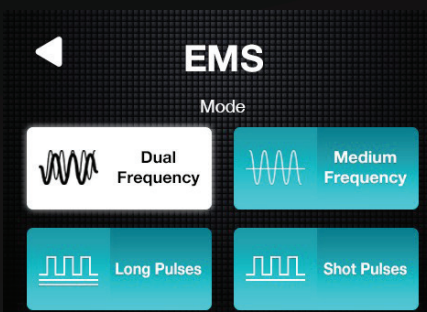

Сесия EMS Свободни ръце

Еве предлага терапия „**свободни ръце**“. Електродите се свързват към електродни подложки, фиксирани към стратегическите мускулни точки на лицето.

Тази терапия осигурява **ефективна мускулна стимулация**, с видим повдигащ ефект.



Микротокова и EMS електротерпии

- ✓ Безболезнени, Комфортни
- ✓ Впечатляващи резултати
- ✓ Без необходимост от време за възстановяване
- ✓ Дълготраен ефект

Хидра дермабразии

Хидрадермабразията на Eve е много ефективно **за цялостно почистване, нежно ексфолиране и добра хидратация на повърхността на кожата**. Това е идеалната първа стъпка във всяка естетична терапия.

Апликаторът за хидрадермабразия на Eve пръска въртящи се струи от **тоника X-Stream** върху кожата. Той разтваря замърсяванията и нежно ексфолира повърхността на кожата, също така ефективно хидратира роговия слой.

След това вакуумно засмукване премахва излющените остатъци, заедно с излишния себум от кожата и замърсяванията от вътрешността на порите.

Резултатът от терапията с хидрадермабразия Eve е **по-здрава, добре хидратирана, свежа и блестяща кожа с много по-гладка текстура**. Ще забележите и значително намаляване на черните точки, както и свиване на големите пори.

4 Естетически предимства



Почистване

Струята X-Stream тоник отстранява замърсяванията и излишния себум.




Ексфолиране

РНА, LHA, и протеолитичните ензими много нежно ексфолиране на мъртвите кожни клетки.



Екстракция


Регулируемата вакуумна функция позволява безболезнено почистване на порите.

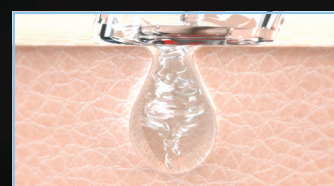


Хидратация

Съставът на the X-Stream тоника Ефективно хидратира повърхностния слой.


Сменяеми накрайници хидра

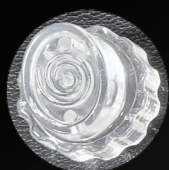


Голям

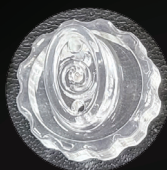

Малък

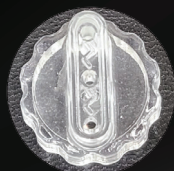

Скалп

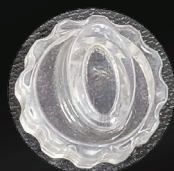

Почистване

Синя/ Бяла LED светлина



Унищожава P. аспе бактериите в космените фоликули и порите на кожата.



Силна светлина, за по-добра видимост.

Диамантен пилинг

Тази функция **премахва слой по слой мъртвите кожни клетки, заедно със замърсяванията и излишния себум**, от повърхностния слой на кожата.

Излющените остатъци се отстраняват чрез регулируемото вакуумно засмукване:

- ✓ Диамантения пилинг подобрява общия вид на кожата:
- ✓ Изсветлява и изравнява тена на кожата.
- ✓ Изглажда зони с кератоза и по-плитки белези от акне.



X-Stream

X-Stream е ексклузивния тоник за функцията хидра дермоабразия. Подходящ за всеки тип кожа, почиства старателно, эксфолира нежно и ефективно хидратира повърхностния слой на кожата. Основните активни съставки на X-Stream са:

РНА (Полихидрокси киселина)

Лактобионовна киселина

РНА е много ефективен хидратант и нежен эксфолиант, подходящ дори за чувствителна кожа.

РНА доказано подобрява тената, намалява вредното влияние на слънцето и околната среда.

Уникални ползи

- ✓ Ефективна хидратация на роговия слой
- ✓ Нежна эксфолиация
- ✓ Подобрява текстурата и тонуса на кожата

Протеолитични ензими

Бромелаин

Бромелаина позволява правилно излющване и клетъчен обмен в епидермиса като помага на собствените на собствените протеолитични ензими на роговия слой да разграждат протеина.

Уникални ползи

- ✓ Нежно эксфолиране на роговия слой
- ✓ Намалява повърхностните бръчки и фините линии



ЛНА (Липохидрокси киселина)

Каприлоил салицилова киселина

ЛНА позволява эксфолиране клетка по клетка, което го прави подходящ дори за най-чувствителната кожа. Намалява зачервяванията и подмладява кожата.

ЛНА е особено ефективен при терапия на екне. Доказано намалява популацията на P. Acne бактериите в мастните жлези.

Уникални ползи

- ✓ Нежно эксфолиране, без зачервяване
- ✓ Намалява акнето
- ✓ Намалява зачервяването

АНА (Алфахидрокси киселини)

Лимонена киселина


Лимонената киселина балансира нивото на Ph на кожата, като по този начин спомага почистващия ефект на тоника.

Други активни съставки

Хиалуронова киселина, Ниацинамид

Тези съставки имат следното положително въздействие:

- ✓ Анти оксидантен ефект
- ✓ Подобрява текстурата на кожата
- ✓ Изравнява тената
- ✓ Изсветлява пигментните петна
- ✓ Възстановяване на естествения воден и мастен баланс на кожата
- ✓ Успокоява кожните раздразнения

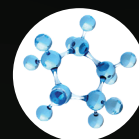




eue

Ace of Face

Технически характеристики

Размери (Net)	Апарат - 20 x 40 x 30 см Количка - 36 x 40 x 105 см
Размери (Опаковка)	Апарат - 35 x 55 x 50 см Количка - 48 x 18 x 76 см
Тегло (Опаковка)	Апарат - 13 кг Количка - 8.5 кг
Консумация на електричество	100-240V, 50 / 60 Hz, Max 100VA (24V / 5A)
Микротокови програми	Electric Current - 10-1000 μ A Frequency - 6-500 Hz Pulse Amplitude - Max 1000 μ A
EMS Програми	Electric Current: 1-3 mA Frequency - 2-2000 Hz Pulse Amplitude - Max 3 mA
Хидра дермоабразия Всмукателна мощност	650 mmHg

Antoanette 30 години
Hair & Beauty 

АНТОАNET OOD, тел.: 0883 220 211  @Antoanette.OOD
www.antoanette.com